




GUÍA DE USO DE LA PLUMA PERCARGADA DE OVITRELLE®

CONTIENE:

1. Capuchón
2. Conector de la aguja
3. Depósito
4. Émbolo
5. Ventana de dosificación
6. Dosificador
7. Protector de aguja
8. Aguja extraíble
9. Funda exterior de la aguja
10. Lengüeta
11. Toallitas de alcohol
12. Contenedor de desechos punzantes.

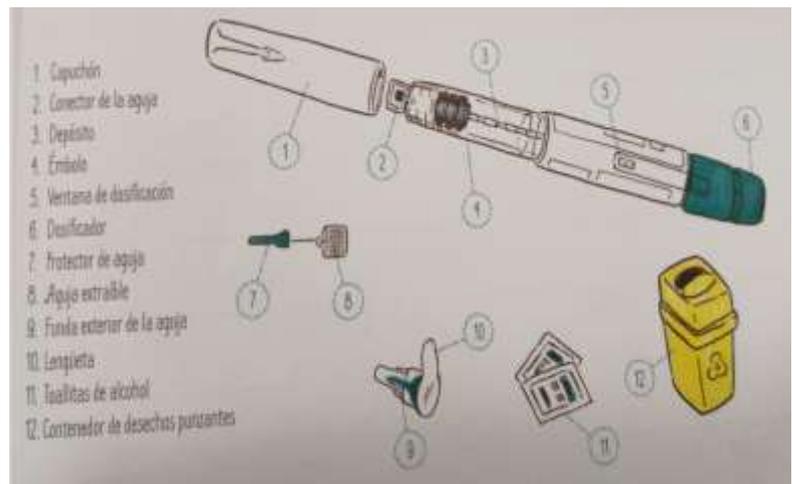

ACOPLAR LA AGUJA


Antes de empezar el proceso es necesario lavarse las manos con agua y jabón. Quitar el capuchón y comprobar que la medicación en el depósito es transparente y no contiene partículas. Comprobar que la ventana de dosificación indica "0". Quitar la lengüeta de la funda exterior de la aguja. Enroscar la funda exterior de la aguja en la pluma hasta que se encuentre bien sujeta, No enroscar muy fuerte porque podría ser difícil de quitar después de la inyección. Quitar la funda exterior de la aguja y sujetar la pluma apuntando hacia arriba. Cuidadosamente quitar el protector verde de la aguja y desecharlo. La primera vez que se use la pluma de Ovitrele®, observar si en la punta de la aguja hay una o más gotas. Si no se ve ninguna gota hay que retirar el aire siguiendo los pasos mencionados en el folleto incluido en la caja de Ovitrele®.






ESTABLECER LA DOSIS PRESCRITA

Girar el dosificador en el sentido de las agujas del reloj. El indicador de la dosis mostrará una línea recta. Hay que seguir girando hasta que se pueda leer el número "250".

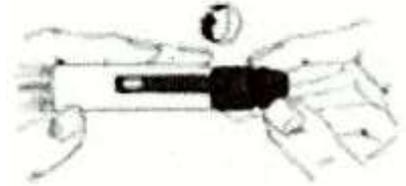


INYECCIÓN DE LA DOSIS

Es importante informar sobre cómo y en qué zona inyectarse. Limpiar bien la piel de la zona de inyección con una toallita o algodón con alcohol y dejar la zona secar al aire. Introducir lentamente la aguja en la piel, de manera completa y en ángulo de 90 grados. Pulsar el dosificador suavemente hasta el final y mantenerlo pulsado al menos 5 segundos. La ventana de dosificación volverá a "0". Sacar la aguja de la piel mientras se mantiene pulsado el dosificador.

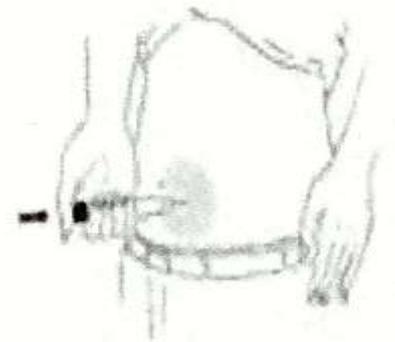

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

Comprobar que el número que muestra la ventana de dosificación es "0" para saber que la dosis prescrita ha sido inyectada en su totalidad. Si el indicador no marca "0", no se debe intentar una nueva inyección. En este caso, es necesario consultar con personal médico o farmacéutico. Sujetar con firmeza la pluma precargada por el soporte del depósito y colocar con cuidado la funda externa en la aguja con cuidado de no pincharse. Desenroscar la aguja girando la funda externa en sentido contrario a las agujas del reloj y desecharla. Nunca se debe reutilizar ni compartir aguja. Volver a colocar el capuchón en la pluma. Ya se puede desechar también la pluma. Es preferible colocarla en su envase original antes de desecharla. Recordar que es importante no reutilizar o compartir agujas.

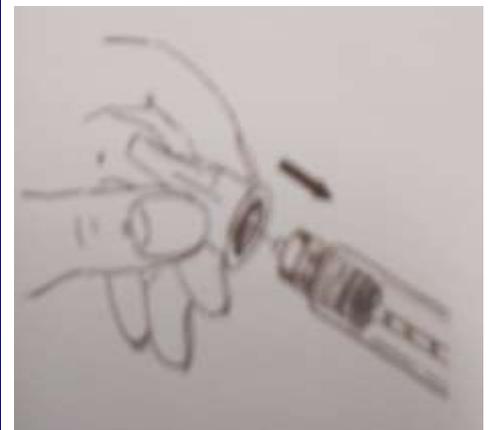



CONSERVACIÓN DE LA PLUMA PRECARGADA DE OVITRELLE®

Guardar la pluma de Ovitrelle® en el embalaje original para protegerlo de la luz en la nevera entre 2°C y 8°C sin congelar.

Una vez abierto, debe utilizarse inmediatamente. Después la pluma debe ser desechada.

No se debe usar la pluma Ovitrelle® después de la fecha de caducidad que aparece en el dispositivo o en el embalaje. La fecha de caducidad hace referencia al último día de este mes. No se debe usar Ovitrelle® si se nota algún signo visible de deterioro, si el líquido contiene partículas o si no es transparente.

Antes de usar la pluma precargada de Ovitrelle® es importante recordar que es necesario leer el prospecto y las instrucciones de uso que vienen junto con la pluma. Si tiene cualquier duda sobre el uso de Ovitrelle®, por favor, contacte con nuestro servicio.