




## AURREZ AURREKO KARGATUTAKO OVITRELLE ® LUMA ERABILTZEKO GIDA

### ZER DUEN:

1. Estalkia
2. Orratzaren konektorea
3. Gordailua
4. Enbola
5. Ventana de dosificación
6. Dosificador
7. Protector de aguja
8. Aguja extraíble
9. Funda exterior de la aguja
10. Langaitza
11. Toallitas de alcohol
12. Contenedor de desechos punzantes

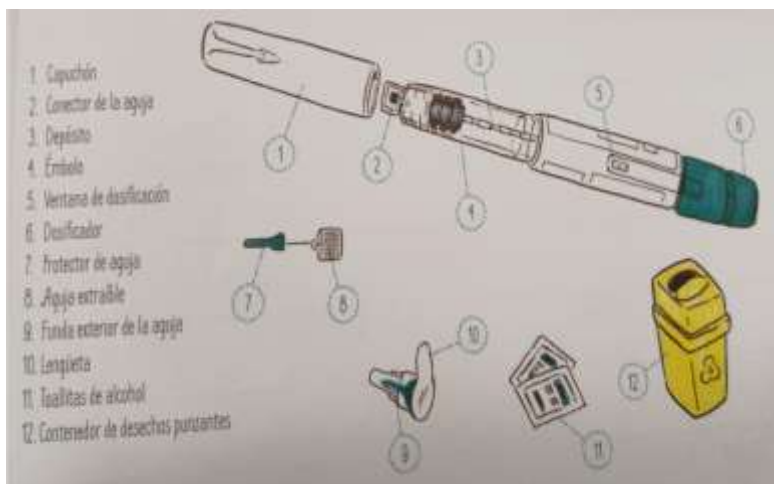


### ORRATZA AKOPLATU

Prozesua hasi aurretik, eskuak ura eta xaboa erabiliz garbitu behar dira. Kendu estalkia eta egiaztatu medikazioa gordailuan gardena dela eta ez duela partikularik. Egiaztatu dosifikazio-leihoak "0" adierazten duela. Kendu mihia orratzaren kanpoko zorrotik. Kiribildu orratzaren kanpoko zorroa luman, ondo eutsita egon arte. Ez kiribildu oso gogor, injekzioaren ondoren zaila izan baitaiteke kentzea. Kendu orratzaren kanpoko zorroa eta eutsi lumari gorantz begira. Kendu kontu handiz orratzaren babesgarri berdea eta bota. Ovitrelle ® luma erabiltzen den lehen aldian, orratzaren puntan tanta bat edo gehiago dauden begiratu behar da. Tantarik ikusten ez bada, airea kendu behar da, Ovitrelle ®-ko kaxan sartutako liburuxkan aipatutako urratsei jarraituz.



### AGINDUTAKO DOSIA EZARRI


Biratu dosifikagailua erloju-orratzen noranzkoan. Dosiaren adierazleak lerro zuzen bat erakutsiko du. Biratzen jarraitu behar da "250" zenbakia irakurri arte.

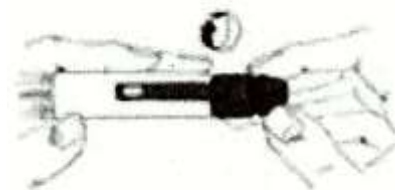



### DOSIAREN INJEKZIOA

Garrantzitsua da jakinaraztea nola eta zer eremutan injektatu behar den. Injekzio eremukoko azala ondo garbitu toallatxo bat edo alkoholdun kotoi bat erabiliz, eta utzi lehortzen. Sartu orratza poliki-poliki larruazalean, osorik eta 90 graduko angeluan. Dosifikagailua leunki sakatu amaieraraino, eta gutxienez 5 segundo eduki sakatuta. Dosifikazio-leihoak "0" ra itzuliko da. Atera orratza larruazaletik dosifikagailua sakatuta mantentzen den bitartean.

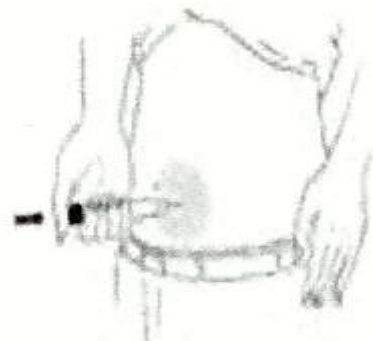

### INJEKZIOAREN ONDOREN

Dosifikazio-leihoak erakusten duen zenbakia "0" dela egiaztatu, agindutako dosi osoa injektatu dela jakiteko. Adierazleak "0" markatzen ez badu, ez da beste injekziorik egiten saiatu behar. Kasu horretan, medikuei edo farmazialariei kontsultatu behar zaie. Eutsi tinko gordailuaren euskarriak kargatutako lumari, eta jarri kontu handiz kanpoko zorroa orratzean, ziztatu gabe. Askatu orratza kanpoko zorroa erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan biratuz, eta bota. Ez da inoiz berrerabili behar, ezta orratza partekatu ere. Jarri berriro estalkia luman. Luma ere bota daiteke. Hobe da jatorrizko ontzian jartzea, bota baino lehen. Gogoratu garrantzitsua dela orratzak ez berrerabiltzea edo partekatzea.



### OVITRELLE® LUMA AURREKARGATUAREN KONTSERBAZIOA

Ovitrelle® luma jatorrizko enbalajearen gorde, hozkailuko argitik babesteko, 2°C eta 8°C artean, izoztu gabe.

Ireki ondoren, berehala erabili behar da. Gero luma bota egin behar da.

Ez da Ovitrelle® luma erabili behar gailuan edo enbalajearen agertzen den iraungitze-dataren ondoren. Iraungitze-data hil honetako azken egunari dagokio. Ez da Ovitrelle® erabili behar ikusteko moduko narriadura-zeinuren bat nabaritzen bada, likidoak partikulak baditu edo gardena ez bada.

Aurrez kargatutako Ovitrelle® luma erabili aurretik, beharrezkoa da gogoratzea lumarekin batera datozen erabilera-jarraibideak eta erabilera-prospektua irakurri behar direla. Ovitrelle® erabiltzeari buruzko zalantzarik baduzu, mesedez, jar zaitetz harremanetan gure zerbitzuarekin.